

PURECLEANSE™

STAT

Instructions for Use

PureCleanse™ STAT

QuickTab™ Cleansing Lavage & Debridement System
for Wounds, Skin and Burns

FOR HOSPITAL & MEDICAL PROFESSIONAL USE

Rev 001

REF STAT250

Product Description

PureCleanse™ STAT is a safe, effective irrigation, moisturizing, and debridement solution formulated to actively cleanse wounds and prepare optimal wound bed healing conditions. The product's unique packaging is quick and easy to open, easy to squeeze, and allows for rapid application of the pure hypochlorous acid (HOCl) cleansing solution contained within.

Indications

Under the supervision of health care professionals, PureCleanse™ STAT is indicated for the cleansing, irrigating, moistening, debridement, and removal of foreign material including microorganisms and debris from exudating and/or dirty wounds, acute and chronic dermal lesions such as stage I-IV pressure ulcers, partial and full-thickness wounds, diabetic foot ulcers, post-surgical wounds, first/second degree burns, grafted and donor sites, and minor irritations of the skin in addition to moistening and lubricating absorbent wound dressings. The product is safe for use on all ages.

Contraindications

Avoid use on individuals allergic or sensitive to hypochlorous acid (HOCl).

Storage

Store the product in a room temperature environment and away from direct sunlight, heat, or extreme cold. Do not freeze. For adequate efficacy, do not use the solution past its expiration date.

Disposal

Dispose of remaining PureCleanse™ STAT solution. Place plastic bottle in the regular garbage or biohazard waste disposal as per your facility's standard protocol. The bottle is made of high density polyethylene (HDPE), a recyclable material. Please recycle wherever possible.

Ingredients

Water, sodium chloride, and 0.033% hypochlorous acid (330 PPM) as a preservative to inhibit growth of microorganisms within the solution.

Instructions

To prepare for use, twist the QuickTab™ cap until it snaps off the bottle's pointed nozzle. Invert and squeeze the bottle to dispense the contained solution.

The following are instructions for common use cases of the product.

Cleansing a Wound


Apply PureCleanse™ STAT solution liberally to irrigate wound and peri-wound tissue. Ensure the wound is thoroughly saturated. No rinse is required.

Soaking a Wound

Saturate gauze with PureCleanse™ STAT solution and apply to wound, soaking for minimum 5 minutes, up to 15 minutes. Remove the gauze. For further debridement, use the gauze to wipe the wound bed. No rinse is required.

Packing a Wound

Saturate packing gauze with PureCleanse™ STAT solution and place it into the wound as appropriate. No rinse is required.

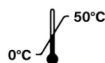

MD

Rx ONLY



MADE IN CANADA



Questions, comments or concerns? Please contact us.

info@biomiq.health | 1-800-573-1295 | www.biomiq.health

Manufactured for Biomiq Inc. by Sterasure Inc.

137 Glasgow St., Unit 115 Kitchener, ON N2G 4X8 Canada

PURECLEANSE™

STAT

Mode d'emploi

PureCleanse™ STAT

Système de Lavage et de Débridement QuickTab™
pour Plaies, Peau et Brûlures

À USAGE HOSPITALIER ET PROFESSIONNEL MÉDICAL

Rev 001

REF STAT250

Description du produit

PureCleanse™ STAT est une solution sûre et efficace d'irrigation, d'hydratation et de débridement, formulée pour nettoyer activement les plaies et créer des conditions optimales de guérison du lit de la plaie. L'emballage unique du produit est facile et rapide à ouvrir, simple à presser, permettant une application rapide de la solution pure d'acide hypochloreux (HOCl) qu'il renferme.

Indications médicales

Sous la supervision de professionnels de la santé, PureCleanse™ STAT est destiné au nettoyage, à l'irrigation, à l'humidification, au débridement et à l'élimination des corps étrangers, y compris les micro-organismes et les débris des plaies exsudatives et/ou sales, des lésions cutanées aiguës et chroniques telles que les stades 1 à 4 des ulcères de pression, ulcères de stase, ulcères diabétiques, plaies post-chirurgicales, brûlures au premier et au deuxième degré, écorchures, les irritations mineures, ulcères du pied diabétique, ongles incarnés, sites greffés, sites donneurs et les sites d'insertion. Il est également destiné à humidifier et lubrifier les pansements absorbants.

Contre-indications

Évitez l'utilisation sur les personnes allergiques ou sensibles à l'acide hypochloreux (HOCl).

Conservation

Conservez le produit dans un environnement à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive ou du froid extrême. Ne pas congeler. Pour une efficacité adéquate, n'utilisez pas la solution au-delà de sa date de péremption.

Disposition après usage

Éliminez la solution restante PureCleanse™ STAT. Placez la bouteille en plastique dans les déchets réguliers ou dans l'élimination des déchets biologiques conformément au protocole standard de votre établissement. La bouteille est fabriquée en polyéthylène haute densité (HDPE), un matériau recyclable. Veuillez recycler lorsque cela est possible.

Ingredients

Eau, chlorure de sodium, et 0,033 % acide hypochloreux (330 PPM) comme agent conservateur. Cette solution acide (HOCl) agit contre la croissance des micro-organismes dans la solution.

Mode d'emploi

Pour la préparation à l'utilisation, tournez le capuchon QuickTab™ jusqu'à ce qu'il se détache du bec pointu de la bouteille. Inversez et pressez la bouteille pour distribuer la solution qu'elle contient.

Les instructions suivantes concernent les usages courants du produit.

Nettoie la plaie


Appliquez généreusement la solution PureCleanse™ STAT pour irriguer la plaie et les tissus périphériques de la plaie. Assurez-vous que la plaie est complètement saturée. Aucun rinçage n'est nécessaire.

Imbibez les gazes

Imbibez une compresse de solution PureCleanse™ STAT et appliquez-la sur la plaie, en la laissant tremper pendant un minimum de 5 minutes, jusqu'à 15 minutes. Retirez la compresse. Pour un débridement supplémentaire, utilisez la compresse pour essuyer le lit de la plaie. Aucun rinçage n'est nécessaire.

Imbibez les compresses

Imbibez une compresse de bourrage avec la solution PureCleanse™ STAT et placez-la dans la plaie selon les besoins. Aucun rinçage n'est nécessaire.

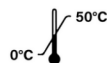

R_X SEULEMENT



FAIT AU CANADA



**Des questions, des commentaires ou des préoccupations ?
Veuillez nous contacter.**

info@biomiq.health | 1-800-573-1295 | www.biomiq.health

 Fabriqué pour Biomiq Inc. par Sterasure Inc.

137 rue Glasgow, Unité 115, Kitchener, ON, N2G 4X8, Canada